

**DONJOY®**

# DonJoy Spinostrap

**SUPPORTO LOMBARE,  
A PORTATA DI MANO**



**enovis™**

**DONJOY®**

## DonJoy Spinostrap

Tutore per osteoporosi. Sostegno e stabilizzazione della colonna nel tratto S1 - T4

DonJoy® Spinostrap mette il medico e i pazienti al comando del supporto lombare. Le sue cinghie regolabili per le spalle, la struttura dorsale esoscheletrica modellabile e la cintura lombare personalizzabile consentono un supporto individualizzato e confortevole, oltre al sollievo della colonna vertebrale toracica. Grazie a questa gamma di caratteristiche intuitive del corsetto semi-rigido per la schiena, il supporto lombare e la correzione posturale cifotica sono facilmente raggiungibili.

### **INDICAZIONI**

- DonJoy Spinostrap è progettato per fornire supporto, stabilizzazione e parziale immobilizzazione (restrizione del movimento) della colonna vertebrale.
- Supporto per fratture spinali stabili
- Correzione posturale da ipercifosi dorsale
- Disfunzione posturale associata a condizioni come la malattia di Parkinson
- Supporto della colonna vertebrale in caso di insufficienza/debolezza muscolare
- Sostegno della colonna artrosica
- Sollievo dal dolore



## CARATTERISTICHE E BENEFICI



**Struttura dorsale esoscheletrica semi-rigida:** per fornire supporto e aiutare il sollievo della colonna vertebrale toracica, il nucleo in alluminio può essere modellato per adattarsi alle curve anatomiche di ogni paziente.



**Tassello posteriore riposizionabile:** può essere posizionato a diverse altezze sulla struttura dorsale per aiutare a controllare l'azione correttiva sulla postura cifotica.



**Cintura lombare regolabile:** regolazione ottimale grazie ai tiranti e alle tasche per le dita.




**Tiranti per le spalle regolabili:** per modificare la tensione alle necessità del paziente, ottimizzano la correzione della postura cifotica tirando indietro le spalle e raddrizzando la schiena.



**Chiusure a velcro:** consentono la personalizzazione della lunghezza dei tiranti per le spalle e della cintura lombare per una vestibilità individuale e comoda.



**Cuscinetti ascellari imbottiti:** per offrire un maggior comfort

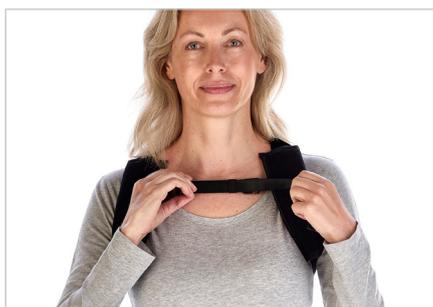

**Chiusura pettorale:** utile per migliorare la distribuzione delle forze e fornire comfort aggiuntivo nell'area ascellare.



**Design sottile e a basso profilo:** invisibile sotto i vestiti.

**Leggero e traspirante:** aiuta a garantire il comfort del paziente.

**Materiali ipoallergenici e morbidi:** per aiutare a evitare irritazioni della pelle. Senza PVC e latex-free.

## INFORMAZIONI PER L'ORDINE

CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA COLONNA C7 - S1	TAGLIA
82-0057-1	42 – 52 cm	S
82-0057-2	52 – 62 cm	M
82-0057-3	62 – 72 cm	L

**DONJOY®**

**enovis™**

*Creating Better Together™*

**enovis.it | vendite@enovis.com | +39 02 835 98001**

DJO Italia srl, Via Leonardo Da Vinci 97, 20090 Trezzano Sul Naviglio, Milano, ITALIA

I contenuti e le immagini sono di proprietà di DJO Italia srl. Destinato alla consultazione di personale sanitario e operatori del settore

MKT-000-00171850-IT - Rev A

Copyright © 2024 DJO, LLC, a subsidiary of Enovis Corporation