



Quick Fit Shoulder Immobilizer

Optimal anvendelse


Aircast Quick Fit Shoulder Immobilizer yder posttraumatisk eller postoperativ immobilisering. Patienter vil have gavn af denne letanvendelige brugertilpassede universalmulighed, der samtidig giver maksimal komfort og klinisk effektivitet. Designet til en række kliniske indikationer der omfatter arm, albue og skulder med indikation for slynge eller immobilisator.

Indikationer: Skulder og stabiliseret armfrakturer (clavicula, proksimale eller midt-humerus frakturer); skader i acromioclavicular-leddet i acceptabel position; skulder-dislokationer der er blevet reduceret, rotator-cuff skader; skader i blødt væv; støtte efter kirurgisk indgreb. **Indikationer for brug af abduktionspude:** Puden bør overvejes når der er behov for at vævet hen over toppen af det glenohumerale led fastholdes i en mere afslappet position under heling.

Fordele og egenskaber

- Lavet af åndbart net for kølig og komfortabel pasform
- Design med release-clips i taljen, hvilket gør den nem at tage af uden at ændre på justeringerne
- Brugertilpasses ved at folde slyngen så den passer til længden på patientens arm
- Passer til såvel venstre som højre, lille eller stor
- 15° abduktionspude for korrekt armlacering i intern rotation
- Tommelfingerløkke indvendig i slyngen til at holde hånden på plads
- Slyngen er med en topstrop der kan åbnes for nem adgang til armen ved kontrollerede ROM-øvelser
- En udskiftelig træningsbold medfølger for at fremme cirkulationsfremmende øvelser
- Skulderstroppen indsættes nemt gennem to "O"-ringe, og det er muligt at justere størrelsen ved hjælp af stroppen

Bestillingsinformationer

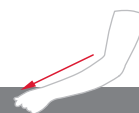

Quick Fit Shoulder Immobilizer			
Varenummer	Min længde	Max længde	Dybde
O6AB	26,5cm	43cm	18cm
O6A (Sling Only)	26,5cm	43cm	18cm