

AIRCAST®

Kit de cuñas para Aquiles

ELEVA EL NIVEL DEL WALKER



enovis™

10° Kit de cuñas




Este conjunto de cuñas para talón de 10° permite adaptar fácilmente EL walker neumático Aircast® AirSelect™ para su uso en la rehabilitación del tendón de Aquiles. Al insertar hasta tres cuñas en la ortesis, el pie puede colocarse en incrementos de 10° de flexión plantar, reduciendo así la tensión en el tendón de Aquiles durante las diferentes etapas de su recuperación.

USO PREVISTO/INDICACIONES:

- Las cuñas de 10° Aircast están diseñadas: para posicionar cómodamente la articulación del tobillo en flexión plantar durante la rehabilitación del tendón de Aquiles para su uso con los walkers ortopédicos Aircast AirSelect Standard y Elite

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Ajustes de altura personalizados** - el kit contiene 3 cuñas
 - 1 cuña = ángulo de 10° de flexión plantar
 - 2 cuñas = ángulo de 20° de flexión plantar
 - 3 cuñas = ángulo de 30° de flexión plantar
- Diseño hueco ligero** pero resistente para mantener un peso adicional al mínimo
- Cinta adhesiva de doble cara** incluida con cada cuña para una aplicación sencilla y fijación segura
- Disponible en 2 tallas:** XS-S-M y L-XL (para adaptarse a los walkers AirSelect Standard y Elite)
- Bilateral:** se adapta a ambos pies. Libre de látex
- Diseño sostenible** fabricado con material reciclado

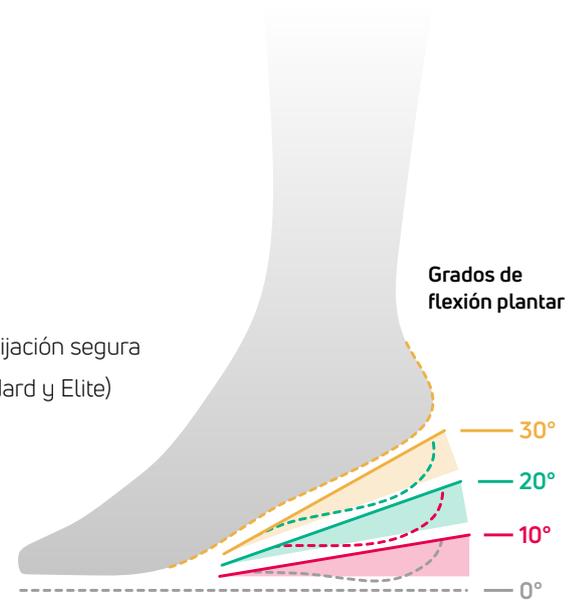

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

REFERENCIA	TALLA DE AIRSELECT
82-0110	XS-S-M
82-0210	L-XL